
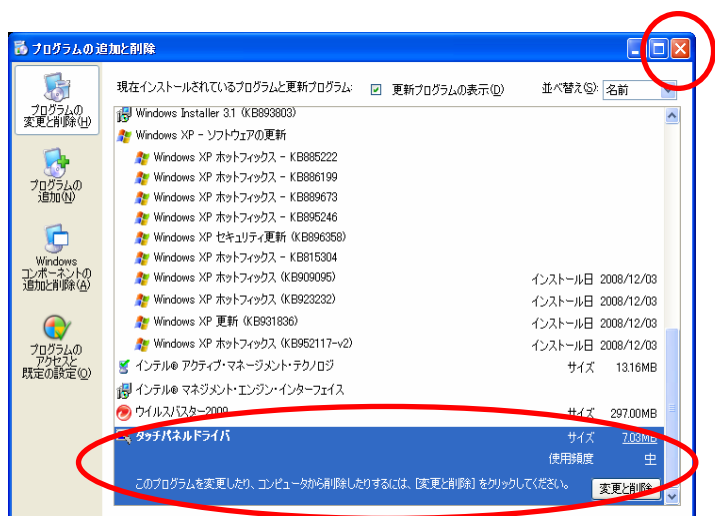


タッチパネル位置合わせの手順

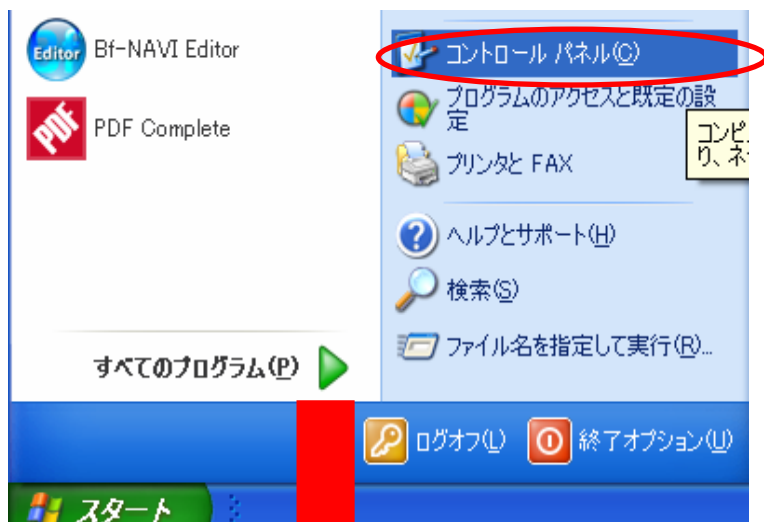

参考


※Bf-NAVI Viewer用推奨タッチパネル (ナナオ製タッチパネルT1502-BBK) を使用中にポインタと接触部にズレが生じる場合は、必要に応じてキャリブレーションを行って下さい。

- 1 スタートボタンをクリック。「コントロールパネル」をクリック。
- 2 デスクトップ上の「プログラムの追加と削除」アイコンをクリック。


- 3 「タッチパネルドライバ」がインストールされていることを確認する。確認後、「閉じる」ボタンをクリック。

参考

「タッチパネルドライバ」のインストールが確認出来ない場合は製品付属のインストーラーCDよりインストールを行って下さい。

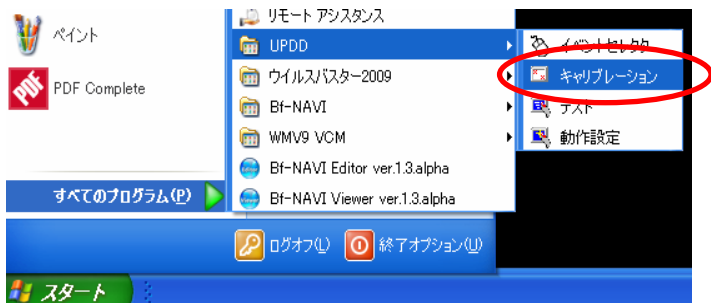


4 スタートボタンをクリック。「すべてのプログラム」→「UPDD」→「「キャリブレーション」を選択。

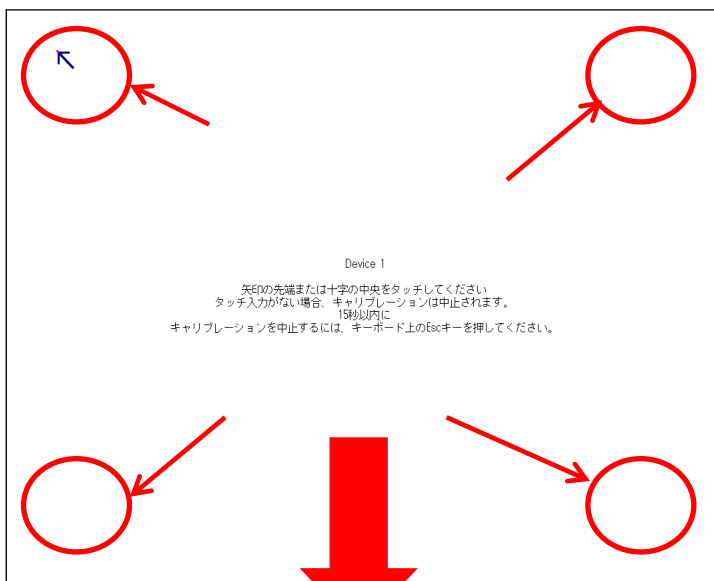

5 ディスプレイがキャリブレーション表示に切り替わります。画面の指示に従って、四隅をタッチする。

6 「キャリブレーション後の確認」ウィンドウが表示されますので指示に従い「OK」ボタンをクリック。

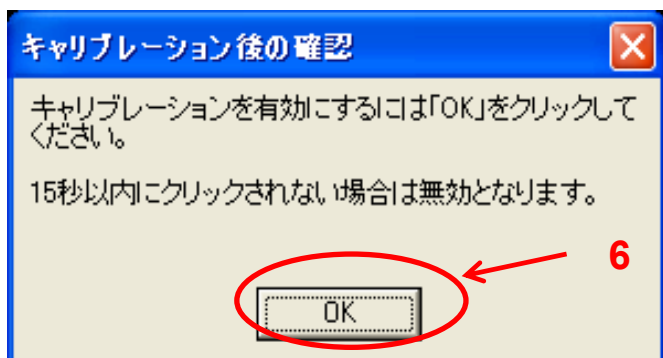

参考

5のキャリブレーションを実施する際は画面指示に従い正確な位置をタッチして下さい。

7 タッチパネルに触れ、正常に動作するかを確認して下さい。

参考

正常動作がなされない場合はPCの再起動、キャリブレーションの再実施、タッチパネルドライバの再インストールを試みて下さい。